

2 やけどに関する注意事項 (その2)



- RFコイルや心電図モニター等のケーブル・コード類は患者さんの皮膚に接触させないこと。

RFコイルの例


写真提供
(社)日本画像医療システム工業会

RFコイルのケーブル等がループを形成すると、やけどや機器の故障のおそれがあります!


適切なポジション

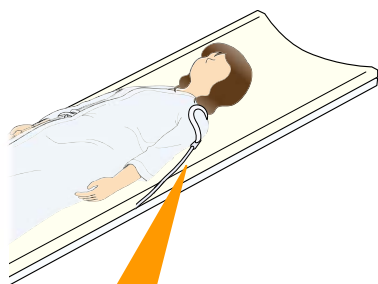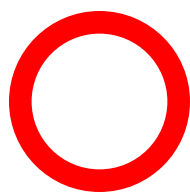

皮膚にケーブルを接触させない！
ループを形成させない！

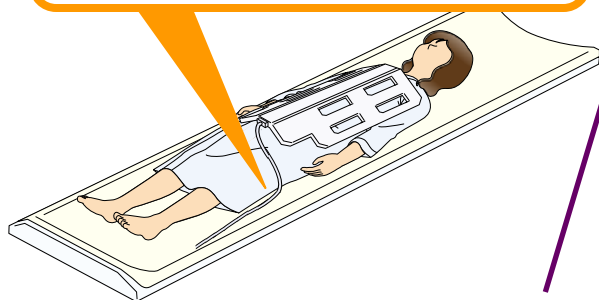

接触のおそれがある部位に
非導電性パッドや乾燥した
タオル等を挟む

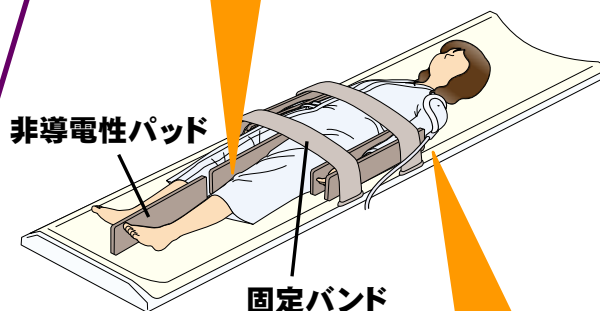

ケーブルは、非導電性パッド等の
外側を通るように配置する

姿勢を維持することが難しい患者さんには、固定バンドを活用してください。非導電性パッドや固定バンドの提供については、MRI装置のメーカーにご相談ください。



本情報の留意点

- * このPMDA医療安全情報は、財団法人日本医療機能評価機構の医療事故情報収集等事業報告書及び薬事法に基づく副作用・不具合報告において収集された事例の中などから、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が専門家の意見を参考に医薬品、医療機器の安全使用推進の観点から医療関係者により分かりやすい形で情報提供を行うものです。
- * この情報の作成に当たり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証するものではありません。
- * この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではなく、あくまで医療従事者に対し、医薬品、医療機器の安全使用の推進を支援する情報として作成したものです。